

Draadloos infrarood warmtekussen



Directe contactwarmte via twee infraroodpanelen aan de voorkant. Het langwerpige formaat is prettig voor gerichte warmte bij onderrug, nek, buik of schoot. De zachte chenille meubelstof voelt comfortabel aan en heeft een rustige structuur.

FORMAAT	ca. 50 x 30 cm
WARMTE	2 frontpanelen - 3 standen
VOEDING	5V USB - minimaal 2A
KABEL	geïntegreerd - ca. 2,5 m

Voor gebruik: controleer kussen, knop, kabel, USB-stekker en eventuele powerbank op schade, vocht of verkleuring.

Snel starten

Gebruik het kussen alleen schoon, droog en onbeschadigd.

1 Kies je voeding

Gebruik een geschikte 5V-powerbank met minimaal 2A, of sluit de geïntegreerde kabel aan op een geschikte USB-poort of 5V-adapter.

2 Sluit aan

Steek de USB-A-stekker volledig in de uitgang van de powerbank, USB-poort of adapter. Plaats een powerbank in het vak aan de achterkant.

3 Zet aan

Houd de knop ongeveer 2 tot 3 seconden ingedrukt. Druk daarna kort om tussen de drie warmtestanden te wisselen.

4 Gebruik de voorkant

Warm 5 tot 10 minuten voor. Leun tegen de voorkant met de knop voor de duidelijkste contactwarmte.

Warmtestanden en geschatte gebruiksduur

Richtwaarden met een volledig geladen Warmpi powerbank van 10.000 mAh; kou, contact en accustaat beïnvloeden de duur.

ROOD

ca. 60 °C

tot ca. 3,5 uur

BLAUW

ca. 50 °C

tot ca. 5 uur

GROEN

ca. 40 °C

tot ca. 6 uur

Belangrijk over de warmte: de temperaturen gelden bij het verwarmingselement. De chenille meubelstof verdeelt de warmte, waardoor de buitenkant milder kan aanvoelen. Gebruik direct lichaamscontact en geef het kussen tijd om op te warmen.

Drie manieren om het kussen te gebruiken

Het kussen wordt verkocht zonder powerbank, met 10.000 mAh of met 20.000 mAh. Controleer altijd de gekozen uitvoering van je bestelling.

Zonder powerbank

Gebruik een eigen geschikte 5V-powerbank met minimaal 2A of de geïntegreerde 2,5m kabel via USB of een 5V-adapter.

10.000 mAh

Compact voor draadloos gebruik. Reken op maximaal ca. 3,5 uur hoog, 5 uur midden en 6 uur laag.

20.000 mAh

Ongeveer tweemaal zoveel capaciteit en daarmee, onder gelijke omstandigheden, ongeveer tweemaal zo lang gebruik.



Aansluiten en opbergen

Open de rits van de Chenille-hoes. Open het klittenband van het powerbankvak op het zwarte binnenkussen, sluit de USB-A-stekker aan en plaats de powerbank met een deel van de kabel in het vak. Sluit het vak en daarna de rits zonder de kabel scherp te knikken.

Gebruik via de lange kabel

Zonder powerbank kun je de geïntegreerde kabel aansluiten op een geschikte USB-poort of een 5V-adapter met minimaal 2A. Leg de kabel zo dat niemand erover kan struikelen en trek nooit aan de kabel.

Problemen oplossen

Situatie	Controleren en oplossen
Geen warmte	Controleer 5V/minimaal 2A, steek USB-A volledig in, houd de knop 2 tot 3 seconden vast en laat 5 tot 10 minuten voorverwarmen.
Knop knippert / kussen valt uit	Laad de powerbank volledig op, controleer de aansluiting en test een geschikte andere 5V-voeding. Stop bij herhaald uitvallen.
Buitenkant voelt lauw	Gebruik de voorkant direct tegen het lichaam. Chenillestof dempt de oppervlaktetemperatuur. Niet dubbelvouwen of strak afdekken.
Gebruikstijd is kort	Laad volledig op en test op Groen. De hoogste stand, lage omgevingstemperatuur en een oudere accu verkorten de gebruiksduur.
USB-poort of stekker wordt heet	Schakel direct uit en ontkoppel. Gebruik de voeding niet opnieuw en neem contact op met Warmpi.
Geur, vlekken, vocht of schade	Schakel direct uit, ontkoppel en gebruik het product niet opnieuw totdat Warmpi het heeft beoordeeld.



Stop onmiddellijk bij ongebruikelijke hitte, brandlucht, verkleuring, vocht, beschadiging of een opgezwollen powerbank. Ontkoppel de voeding en neem contact op met Warmpi.

Belangrijke veiligheidsregels


- Alleen bedoeld voor persoonlijke warmte en comfort; dit is geen medisch hulpmiddel.
- Controleer voor ieder gebruik kussen, knop, kabel, stekker en powerbank.
- Niet gebruiken wanneer het product nat, vochtig, beschadigd of verkleurd is.
- Niet scherp vouwen, knikken, doorboren, pletten of onder zware voorwerpen gebruiken.
- Niet gebruiken tijdens het slapen, zonder toezicht of in een vochtige omgeving.
- Niet combineren met een kruik, elektrische deken of andere warmtebron.
- Kinderen en mensen met verminderd warmtegevoel alleen onder voortdurend toezicht.
- Begin bij een gevoelige huid op Groen en controleer de huid regelmatig.
- Leg de powerbank niet op een warmtepaneel en klem hem niet onder lichaamsgewicht.
- Gebruik alleen een geschikte 5V-voeding met minimaal 2A; niet gebruiken tijdens het opladen van de powerbank.
- Houd aansluitingen vrij van stof, vloeistof en metalen voorwerpen.
- Schakel na gebruik uit, ontkoppel de voeding en laat het kussen afkoelen.

Reinigen en bewaren

- Schakel uit, ontkoppel de voeding en laat het kussen volledig afkoelen.
- Open de Chenille-hoes en verwijder het volledige zwarte verwarmde binnenkussen en de powerbank.
- Was alleen de losse Chenille-buitenhoe op maximaal 30 °C met een fijnwasprogramma.
- Was of dompel het zwarte verwarmde binnenkussen, de knop, kabel en powerbank nooit onder.
- Laat de hoes volledig aan de lucht drogen. Niet bleken, strijken of in de droger.
- Bewaar droog en ruim, zonder zware voorwerpen erop en zonder scherpe knikken in de kabel.

Technische informatie

Product	Warmpi Chenille warmtekussen - ca. 50 x 30 cm
Warmte	2 frontpanelen - Groen ca. 40 °C / Blauw ca. 50 °C / Rood ca. 60 °C
Voeding	5V DC - minimaal 2A - USB-A
Kabel	geïntegreerd - ca. 2,5 m
Materiaal	Chenille-buitenhoe met zwart verwarmd binnenkussen en vulling
Powerbank	optioneel 10.000 of 20.000 mAh
Gebruik	directe contactwarmte, binnengebruik

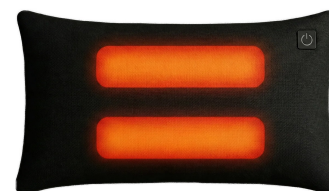

Afvoer en contact

Voer elektronica en powerbanks niet af met het huisvuil, maar lever ze apart in volgens lokale regels. Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Nederland - info@warmpi.com - warmpi.com.